

## 『カラーセルリガチャーディスペンサー』

製品番号：361-098、369-099



### 各色のリガチャーを取り出す手順

1. 外蓋の側面に配置されたインジケーター（下向きの矢印）を、取り出したい色の位置まで時計回りに回します（図 A 参照）。

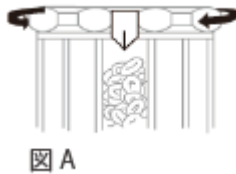


図 A

2. このとき、開口部が重なり、上面から見ると図 B のように星形の取り出し口が形成されます。



図 B

3. ディスペンサーを反転させ、軽く振ってリガチャーを取り出します。
4. 必要な量を取り出した後、蓋を反時計回りに 10° ～ 15° 回して開口部を閉じます。

### 中央部からリガチャーを取り出す手順

1. 中央の矢印の指示に従い、小さな開口部が重なって星形に見える位置まで、蓋を反時計回りに回します（図 C 参照）。



TP Orthodontics Japan



図 C

2. ディスペンサーを反転させ、軽く振ってリガチャーを取り出します。
3. 取り出し後は、星形が見えなくなるまで蓋を  $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$  戻し、開口部を完全に閉じます（図 D 参照）。



図 D

## 注意事項

### 蓋の取り外し禁止

リガチャーの取り出し時および補充時に、蓋を外さないでください。

### 誤って外れた場合の対処

万が一蓋が外れてしまった場合は、蓋の裏側にあるディスクを元の位置に戻してくださいその際、4 箇所のラグ（突起）が下向きにセットされていることを必ず確認してください。

