


『カラーセル リガチャー リフィル』
製品番号：361-074 ～ 361-097



リフィルの補充方法

1. 『カラーセル リガチャーディスペンサー』の蓋を時計回りに回し、側面にあるインジケーター（矢印）を補充したいリフィルの色の位置に合わせます。
2. リフィルチューブの蓋を取り外します。
3. 補充箇所の開口部に対し、リフィルチューブを垂直に差し込みます。
4. リフィルチューブの先端を親指と人差し指でしっかりと固定します。
5. もう一方の手でチューブ本体を持ち、左右に素早く捻ることで、リガチャーを本体内へ落とし込みます。

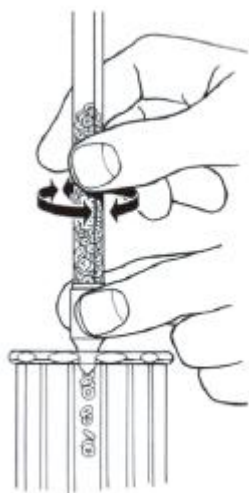

6. 補充の際は、容器上部に6 mm以上の余白（スペース）を残すようにしてください。上部まで満たしてしまうと、使用時にリガチャーが詰まり、スムーズに排出されなくなる原因となります。
7. 補充後、リフィルチューブをゆっくりと傾けながら、本体から抜き取ります。

注意事項

蓋の取り外し禁止：リフィルの補充作業中に、本体の蓋を外さないでください。